

SISTEM ZA SPOLJNU FIKSACIJU KOSTIJU PO MITKOVIĆU

MINI SPOLJNI FIKSATOR ZA KOSTI ŠAKE I STOPALA PO MITKOVIĆU

Kataloški broj
1005.02.000.000



Korekcija angulacije u
sagitalnoj ravni




Korekcija translacije u frontalnoj ravni




Fiksacija falange i
metakarpalne kosti

MINI SPOLJNI FIKSATOR ZA KOSTI ŠAKE I STOPALA SA KOMPRESIONO-DISTRAKCIJONIM UREĐAJEM PO MITKOVIĆU

Kataloški broj
1007.02.000.000

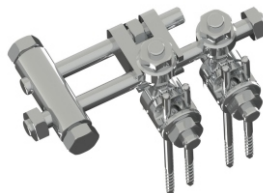

Korekcija angulacije u
frontalnoj ravni

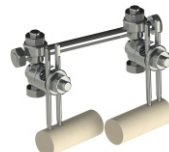

Korekcija translacije u
sagitalnoj ravni



Korekcija rotacije



Fiksacija kratkog fragmenta



Univerzalna spojnika - klema

Svaka klema može da fiksira istovremeno ili šipku za šipku
ili šipku za klin 2 mm ili šipku za klin 4 mm

Primenjuje se za lečenje otvorenih i zatvorenih dijafizarnih, metafizarnih i intraartikularnih preloma malih kostiju (metakarpalnih, falangealnih, metatarzalnih) a pogodan je i za fiksaciju preloma distalnog okrajka radijusa, distalnog okrajka ulne kao i za prelome distalnog humerusa i proksimalne ulne a što je opisano u posebnim uputstvima i novoj knjizi prof. Mitkovića. Ovaj visoko mobilni uređaj je pogodan za fiksaciju Kiršnerovih igala prečnika 2 mm. Takođe je pogodan za lečenje nesraslih, loše sraslih preloma i pseudoartroza, zatim preloma udruženih sa teškim opekotinama, za artrodeze i prelome kod kojih se planiraju razne plastične i rekonstruktivne procedure



ORTOKON d.o.o. Niš
Bulevar Sv cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija

tel/fax: +381.(0)18.550610 mail: info@ortokon.rs
550611 www.ortokon.rs

PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA

KA-07.0
01.10.2015